


Tillbehör för individuella behov



De individuellt avtagbara, robusta armstöden av PU-skum kan justeras optimalt för respektive patient med hjälp av en kullad.



Av säkerhetsskäl för dina patienter kan sidogaller snabbt och enkelt fästas på fyra punkter på DreamLine.

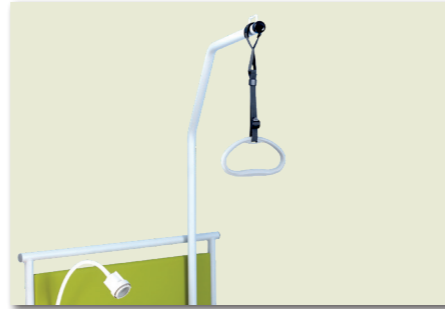

Handtag som underlättar för dina patienter att resa sig upp och gör dem oberoende av extern hjälp.



En infusionsstolpe kan också enkelt fästas på DreamLines huvuddel för att spara utrymme.



Den flexibla LED-lampan ger dina patienter ett behagligt ljus för att läsa eller arbeta under behandlingen.



Velo möjliggör extra rörelse under behandlingen. Det kan justeras optimalt för varje patient med det elektriskt justerbara fotstödet.

Fotstöd och huvudgavel finns i många färger. Madrassen är alltid vit. Vänligen kontakta oss!

Standardfärg
Chromgrau

Amazonas

Feuer

Atoll

Teknisk data:

Mått

Total bredd utan armstöd	90 cm
Total längd	230 cm
Bredd madrass	75 cm
Längd madrass	215 cm
Totalvikt	123 kg

Justeringsalternativ

Bakre sektionsvinkel	0° – 75°
Sitsdelens vinkel	0° – 25°
Benvinkel	0° – 25° (55°)
Fotstöd	23 cm
Höjjustering, inkl. madrass	53 – 93 cm

Elektriska egenskaper

Skyddsklass	2
Skyddstyp	IPX 4
Motsvarar	EN 60601
Motorer	5

Säkerhet

Säker arbetsbelastning	250 kg
Vinkel chockposition	- 12°
Tid chockposition	15 sec



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

Tekniska ändringar reserverade
B-MOBD/LSV/01.2021-01

Terapistolen med sammanhängande liggande yta - Flexibel för mer komfort och vila



DreamLine - se till att dina patienter både kan sitta och vila bekvämt under behandlingen




En mycket låg i- & urstigningshöjd underlättar åtkomst för dina patienter - speciellt för dina patienter i rullstolar.



Under behandlingen kan dina patienter röra sig självständigt i en bekväm och avkopplande position - med en fjärrkontroll vid varje sida.



Om dina patienter vill vila kan DreamLine enkelt justeras till en bekväm liggposition.

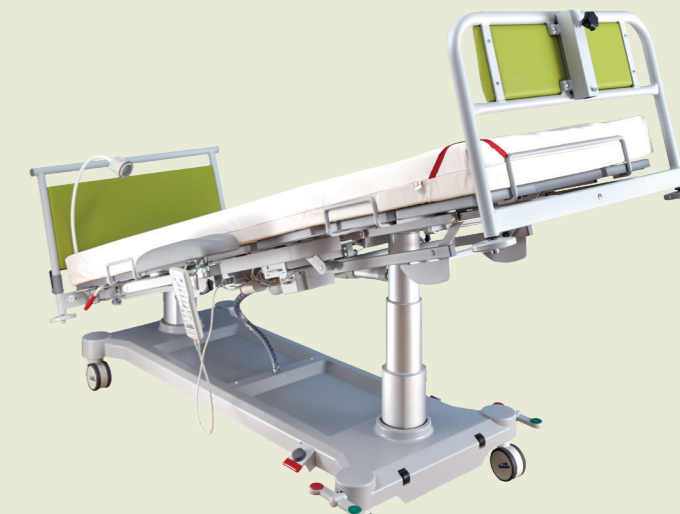

Chockpositionen - omedelbart aktiverad med fotomkopplare på båda sidor - ger personalen båda händerna fria för att hjälpa patienten.

Den förbättrade DreamLine utökar perfekt fördelarna med en terapistol med en sammanhängande, liggande yta och erbjuder samtidigt flexibilitet och speciell komfort.

Den uppfyller dina patienters individuella behov, har justerbarasitt- och komfortpositioner samt erbjuder även ett avkopplande liggande viloläge.

De fem tysta motorerna möjliggör enkel och steglös justering av önskad liggande och sittande position med hjälp av en lättanvänd fjärrkontroll på vardera sidan av stolen. Det elektriskt justerbara fotstödet ger mer komfort under behandlingen – även för patienter med olika längd. En Velo-tränare kan också fästas på fotstödet.

Den stabila konstruktionen gör DreamLine mycket säker att använda i alla positioner. Potentialutjämnningen enligt EN 60601 ger ytterligare säkerhet för dina patienter.

Under den avtagbara madrassen finns individuella plastpaneler som är enkla att desinficera, vilka även säkerställer både liggande och sittande komfort för patienten när DreamLine används.

Dessutom ger ett stort förvaringsutrymme i underramen tillräckligt med utrymme för tillbehör eller fungerar som en förvaringsyta, till exempel för dina patients skor.

I nödsituationer kan baksektionen sänkas manuellt från båda sidor och chockläget kan snabbt nås via fotomkopplaren.

Individuella tillbehör som armstöd, infusionsstolpe, velo-motion-tränare och handtag för att resa sig upp, ökar DreamLines funktionalitet och flexibilitet och kan fästas på ett platsbesparande sätt. Om din patienter vill läsa eller arbeta ger LED-lampan ett behagligt ljus. För extra säkerhet finns totalt fyra fästbara sidogaller tillgängliga.

Dessa kan enkelt förvaras på hållaren vid huvudgaveln.




Den användarvänliga fjärrkontrollen, med permanent programmerad liggande, sittande och vilande position, möjliggör enkel individuell justering. För ännu mer komfort finns det en fjärrkontroll på vardera sidan av stolen.



Med det elektriskt justerbara fotstödet kan DreamLine enkelt anpassas till patientens längd. Fotstödet kan också tas bort som tillval.



Under madrassen, som är lätt att rengöra, ligger individuellt avtagbara plastplattor vilka ger en stabil, säker och hygienisk stödyta. Det förprogrammerade rengöringsläget garanterar enkel åtkomst till alla delar vilket ökar infektionskontroll.

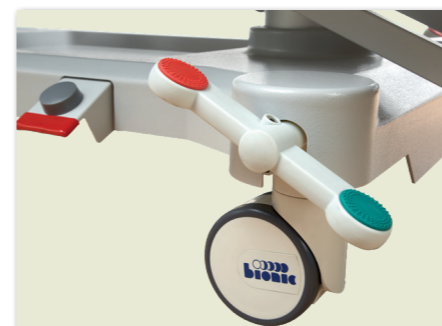

Fotpedalerna för chockläget liksom den färgkodade centralbromsen finns på underramen.



Huvudgaveln kan snabbt och enkelt tas bort i en nödsituation, så man kommer åt patienten utan hinder.



I nödsituationer kan HLR-handtaget användas för att snabbt sänka baksektionen manuellt. För säkerhet är ett HLR-handtag installerat på båda sidor av DreamLine.