

Funktion och komfort för dina patienter



Stolen visas här med extra tillbehör.

BasicLine2 – Funktionell design för bästa behandlingsförhållanden



Fotstöd är ett tillval

Den upprätt positionen för i- och urstigning ställs enkelt in med en förprogrammerad knapp.



Fotstöd är ett tillval

Med hjälp av spaken kan armstödet justeras till önskad position och lutning.



Fotstöd är ett tillval

För optimal avkoppling erbjuder BasicLine2 individuell justering av alla segment.



Fotstöd är ett tillval

Den extra breda fotpedalen aktiverar chockpositionen – en handsfree-funktion för den medicinska personalen.

BasicLine2 utvecklades speciellt för kraven i dialyspraxis, onkologiska dagkliniker, infusions- och transfusionsmedicin och är också mycket lämplig för användning i allmänmedicinsk praxis.

De innovativa armstöden ger stolen sitt speciella utseende. De kan manövreras intuitivt och ger möjlighet till flexibel justering för en ideal punktering samt en bekväm sittställning för patienterna eller blodgivarna/plasmagivarna.

BasicLine2 kombinerar mångsidighet med ekonomi. Smidiga hjul, enkelt i- och urstigning, kontinuerligt motoriserad rörelse till önskad position och samma högkvalitativa material som i alla Bionic-behandlingsstolar erbjuder de bästa behandlingsförhållandena.

Armstöden med överbelastningsskydd och basramen, som garanterar stabilitet, ger nödvändig säkerhet. Fotpedal finns på båda sidor om underramen och används för att aktivera det omedelbara chockläget.


Det valfria, individuellt justerbara fotstödet erbjuder ännu mer komfort för dina patienter. Som ett alternativ för nätanslutning kan BasicLine2 även drivas med ett kraftfullt uppladdningsbart batteri och därmed placeras var som helst.




BasicLine2 finns i många färger och kan anpassas till din interiör. Kontakta oss för det omfattande färgschemat!



Den bekväma fasta kudden ger bra komfort under behandlingstiden.

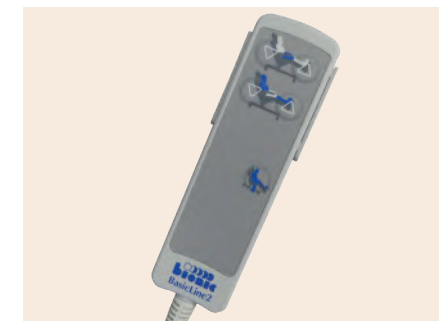


Den upplysta handkontrollen är tydlig och enkel. Den upprättstående positionen är enkelt tillgänglig med endast en knapp.

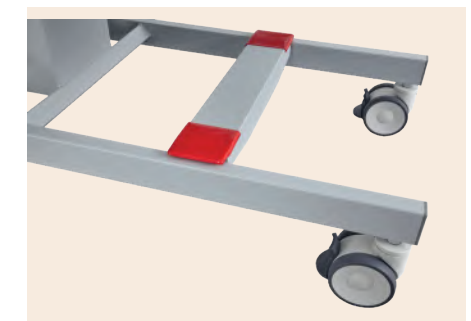

Chockpositionen kan aktiveras handsfree med den extra breda röda fotpedalen - från båda sidor.



Det överbelastningsskyddade armstödet kan svängas intuitivt och enkelt åt sidan samt sänkas framåt med spaken för optimal position.

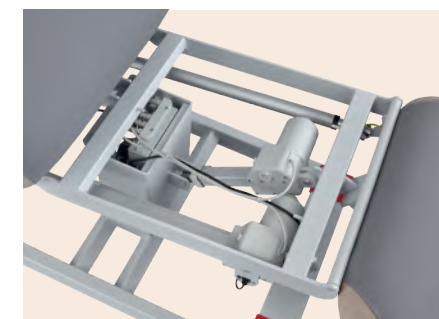

De två motorerna är placerade direkt under den avtagbara sätetsdelen.



Strömutfjäring enligt EN 60601 förbättrar säkerheten för din patient.

Individuella tillbehör - harmonisk i modern design




Lampa



Handtag



Infusionsstativ

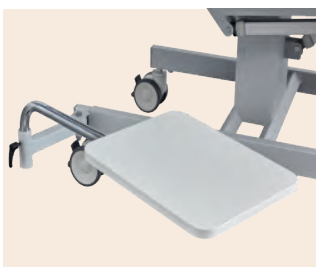

Utrustningsbord



Skyddshölje för benstöd



Justerbart fotstöd



USB port för laddning



Pappersrullehållare

Teknisk data

Dimensioner

Bredd inkl armstöd	90 cm
Bredd sättesegment	58 cm
Totalt längd	203 – 230 cm
Armstöd	52 x 15,5 cm
Totalt vikt	80 kg

Justeringsmöjligheter

Vinkel ryggsegment	75° – 20°
Vinkel sättesegment	30° – 5°
Vinkel bensegment	5° – 30°
Fotstöd	30 cm

Elektriska specifikationer

Strömförsörjning/spänning	100 – 240 Volt 50/60 Hz
Skyddsklass	II
Skyddskategori	IPX 4
Motorer	2
Driftspänning på batteriet (tillval)	25,2 Volt
Batteriets kapacitet (tillval)	1800 mAh

Säkerhet

Maxbelastning	175 kg
---------------	--------

Den illustrerande stolen visar även tillval som inte ingår i standardversionen. Stolens standarddesign är enfärgad Chromgrå.



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
 Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com