

Tillbehör för dina individuella krav



För högre hygienkrav kan en pappersrullehållare enkelt monteras på stolens baksegment.




Den praktiska lampan ger dina patienter möjlighet till extra ljus för t ex läsning.



Infusionsstativet kan monteras på vänster eller höger sida av basramen för att spara plats.




SlimLine kan utrustas med en ekvivalent potentialbindning om så önskas.

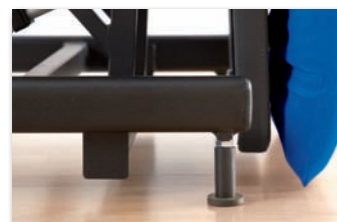

Stabila fötter kan, vid behov, ge en ännu lägre ingångshöjd på endast 54 cm.



Den praktiska väskhållaren kan snabbt och enkelt monteras på armstödet.

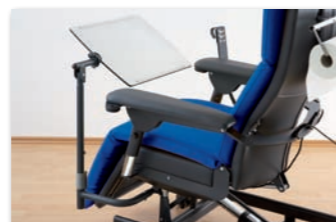

Det flexibla och platsbesparande bordet är enkelt att justera och ger dina patienter en högre komfort.



Tillgängliga färger: Armstöd, basklädsel och nackkudde utförs alltid i Anthrazit. Atoll är standard som klädsel färg. Det finns många andra färger tillgängliga. Be om vår färgkarta. Avfärgningar från jeans eller andra textilier undantas från tillverkarens garanti.

Teknisk data:

Dimensioner

Bredd sätessegment	54 cm
Bredd inkl armstöd	80 cm
Höjd (fast, med hjul, standard)	57,5 cm
Höjd (fast, med fötter, valfritt)	54 cm
Total längd	185 cm
Total vikt	51 kg

Säkerhet

Maxbelastning	175 kg
Vinkel chockposition	- 10°

Justeringsmöjligheter

Vinkel ryggsegment	37° – 90°
Vinkel sätessegment	- 4° – 20°
Vinkel bensegment	0° – 90°

Elektriska specifikationer

Skyddsklass	2
Skyddskategori	IPX 6
Skyddskategori (motorer)	IPX 4
I överensstämmelse med	EN 60601
Motorer	2



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Phone: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

Right for technical modifications reserved
B-MOBSLE/04.2017-02

Platssparande, flexibel och bekväm – SlimLine för infusionsterapi



SlimLine – minimalt utrymmesbehov samt maximal komfort och flexibilitet för dina patienter



Enkel i- & urstigning från stolens framsida är möjlig tack vare den låga sithöjden på endast 57,5 cm, det justerbara och vinklade bensegmentet samt den perfekta sitslutningen.



SlimLine behandlingsstol har utvecklats speciellt för infusionsterapi och kan snabbt och enkelt justeras till ett bekvämt komfortläge med två motorer.



I en nödsituation kan SlimLine flyttas till chockposition för hjärt- & lungräddning genom att trycka på en knapp. Även om basramen är liten och platsbesparande har stolen en perfekt stabilitet.

SlimLine behandlingsstol har utvecklats för behoven till onkologikliniker och för infusionsterapier.

Den smala och lätta behandlingsstolen, med sina två motorer, ger möjlighet till flexibilitet och högsta komfort även i små rum och garanterar dina patienter god komfort under behandlingen.

Med hjälp av den användarvänliga och enkla fjärrkontrollen kan rygg-, sätes- och bensegmenten justeras till önskat läge. Bensegmentet rör sig synkroniserat med sätet och ryggsegmentet kan justeras separat. Med en förprogrammerad knapp kan SlimLine enkelt flyttas till ett avslappnat komfortläge. Och vid ev. nödsituation flyttar man till chockposition med ett knapptryck. Det finns en praktisk hållare till fjärrkontrollen på varje armstöd och fjärrkontrollen är därför alltid lättillgänglig för patienterna.

Armstödet speciella koncept och design garanterar högsta stabilitet även vid i- & urstigning från stolens framsida. Armstödet kan snabbt och enkelt sänkas genom ett knapptryck och kan på så sätt enkelt anpassas efter dina patienters önskemål.

Den avtagbara madrassen är lätt att rengöra och i kombination med den unika basklädseln garanteras komforten. Det ergonomiskt formade ryggsegmentet och den separata sätesmadrassen, ger en bekväm och avslappnad position under långvariga behandlingar.

Den bekväma nackkudden kan enkelt justeras till önskat läge med en motvikt.

Ytterligare individuella tillbehör som infusionsstativ, pappersrullehållare och bord kan monteras direkt på SlimLine och är kräver därför minimalt med utrymme. En praktisk lampa finns som tillval och ger dina patienter möjlighet till extra ljus för t ex läsning eller arbete. SlimLine kan även utrustas med en ekvivalent potentialbindning om så önskas.


Basramen, armstöden och den valfria nackkudden är alltid utförda i Anthrazit. Till SlimLine-madrassen finns det 30 olika färger att välja mellan och kan därför anpassas, så den passar in i behandlingsrummet.



Nackkudden erbjuder högre komfort för patienten och kan justeras individuellt med en motvikt.



Mer flexibilitet: SlimLine är utrustad med hjul (7,5 cm ø) med broms.

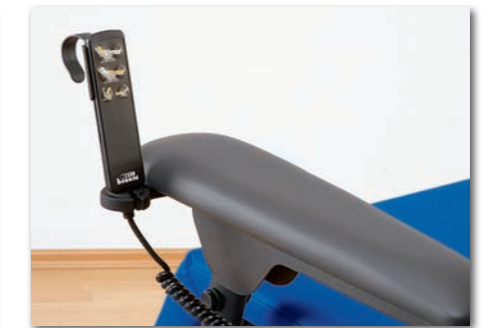

Fjärrkontrollen är användarvänlig och har två förprogrammerade knappar för en enkel styrning. Varje armstöd är utrustat med en lättåtkomlig hållare för fjärrkontrollen.



De stabila armstöden kan sänkas genom ett knapptryck och kan på så sätt enkelt anpassas efter dina patienters önskemål.



Den unika basklädseln består av ett ergonomiskt format ryggsegment och ett flexibelt sätessegment.



Den löstagbara madrassen är lätt att rengöra och ger, i kombination med basklädseln, en god komfort.